


順送式入浴装置 介護エイドバス

# ロベリア

ROB-410C/R/L、415R/L

## 操作手順書

入浴手順	2
お湯をはる	2
担架への移乗	3
ストレッチャーを浴槽へ連結	5
担架を浴槽内へ移動させる	5
浴槽を上昇させ入浴させる	6
入浴中にストレッチャーの連結を解除したい場合	7
浴槽を下降させ出浴させる	8
担浴をストレッチャーへ移動する	9
ストレッチャーの連結を解除	9
担架からの移乗	10

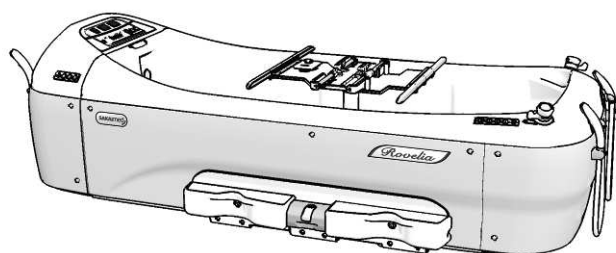

本操作手順書は、一連の入浴介助の手順を簡易的にまとめたものです。本製品を安全に正しく使用していただくために取扱説明書を読んで操作を熟知され、各注意事項を厳守しながらご使用ください。

別冊の取扱説明書を必ず読み、注意事項を守りながら入浴介助を行なってください。

ストレッチャーの連結・担架の移動に関する詳細事項は、浴槽（ROB-410、415）取扱説明書の「入出浴作業」をご覧ください。

浴槽（スタンダードタイプ）	・・・ROB-410
浴槽（シンプルタイプ）	・・・ROB-415
担架（上肢用サイドフェンス、フットガード付）	・・・WS-400
担架	・・・WS-405
電動昇降式ストレッチャー	・・・ST-380, ST-380S
固定式ストレッチャー	・・・ST-370, ST-370S


# 入浴手順

## 1

お湯をはる


### 1

浴槽内の2か所の排水栓を閉じる

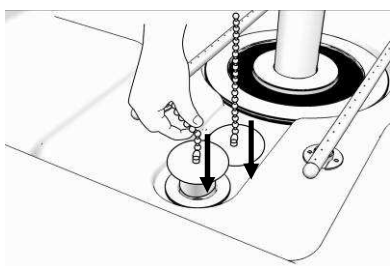


### 2

給湯温度を設定する

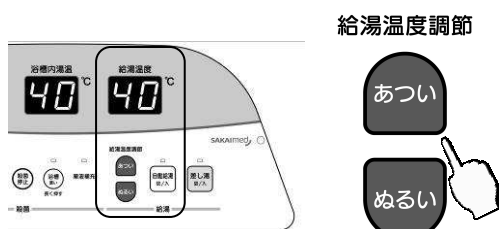

### 3

自動給湯スイッチを押す

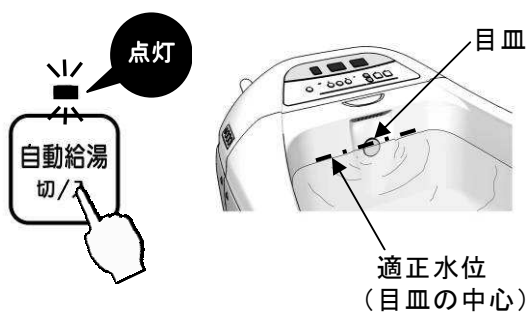


- ・ 適正水位で自動的に給湯停止
- ・ 46℃以上のとき自動的に給湯停止

# 入浴手順


## 2 担架への移乗

### 1 キャスターをロックする

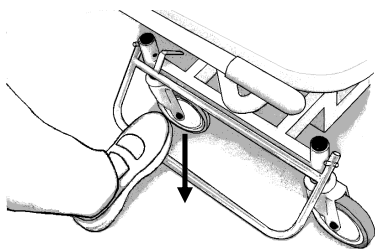


### 2 ストレッチャーの高さを調節する

<ST-380,380S の場合>

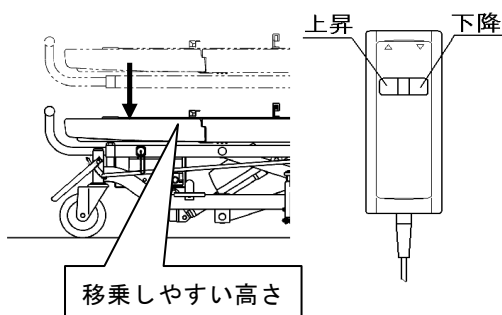


### 3 手すりを跳ね上げる

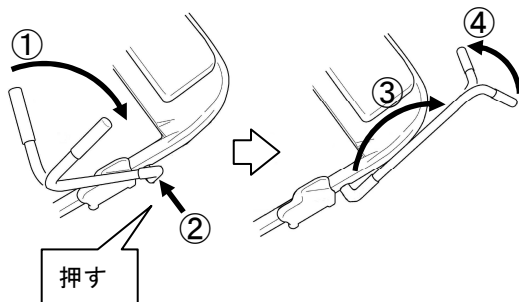


### 4 上肢用サイドフェンスを倒す

<WS-400 の場合>

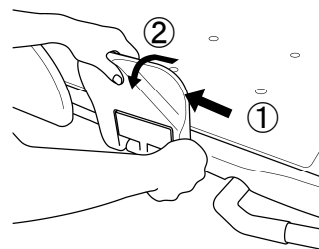


### 5 下肢用サイドフェンスを倒す

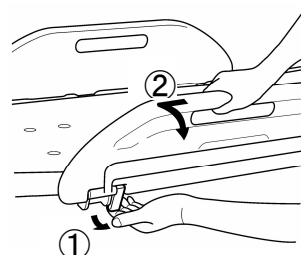

⚠ 警告

移乗と反対側のサイドフェンスは  
起こしておく


### 6 担架へ移乗する

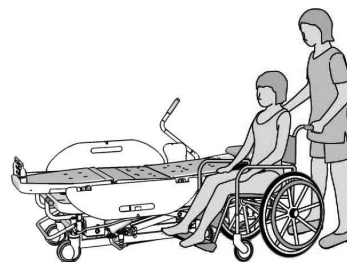


⚠ 警告

入浴者の落下に注意

## 7 3本の安全ベルトを着用する

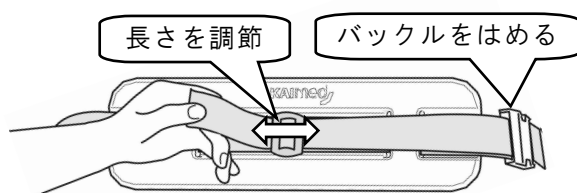

## 8 手すりと全てのサイドフェンスを元に戻す

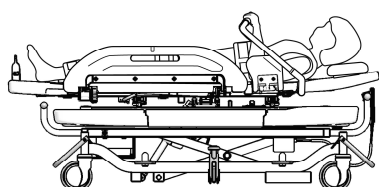


⚠ 警告


サイドフェンスのロック確認

## 9 ストレッチャーを上昇させる


<ST-380, 380S の場合>

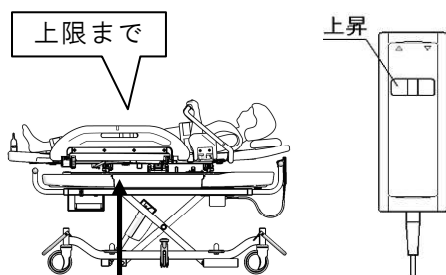


## 10 枕の位置を調節する

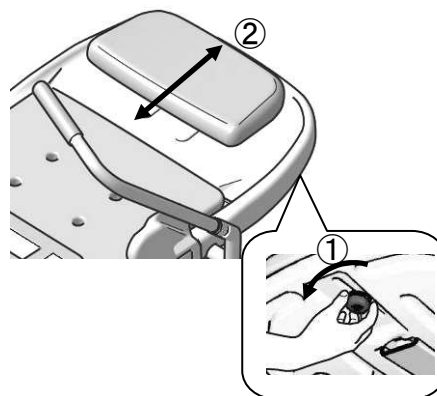

## 11 キャスターのロックを解除する

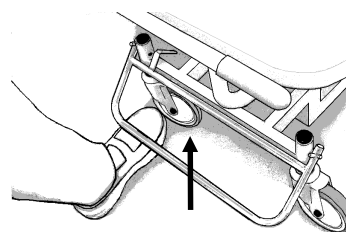


## 12 浴槽の横へ移動する

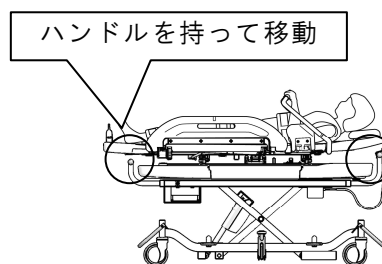


# 入浴手順

## 3 ストレッチャーを浴槽へ連結


- 1 青色の位置合わせシールを目安に、ストレッチャーを浴槽へ押し当てる

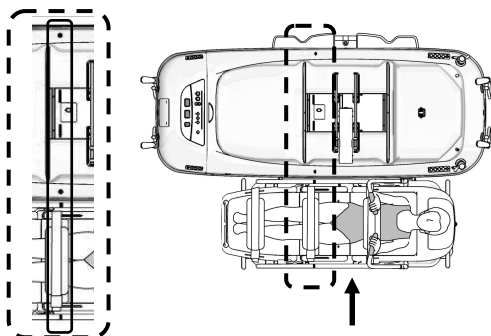

- 2 連結完了ランプの点灯を確認

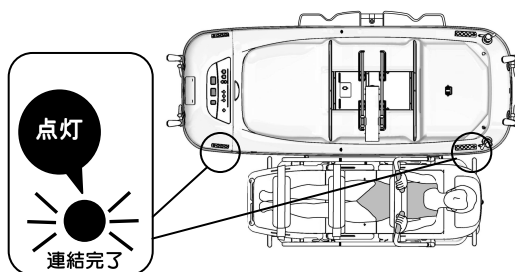

- 3 キャスターをロックする

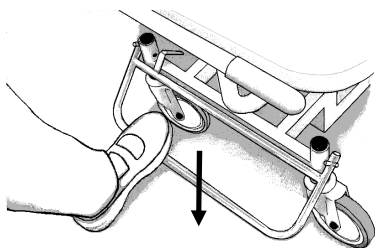


## 4 担架を浴槽内へ移動させる


- 1 オートスライドの位置を確認

<ROB-410 の場合>

連結側と逆の位置にある場合は、連結側の出浴スイッチを押す。

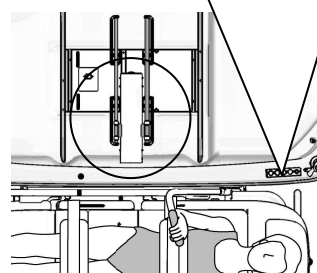

- 2 担架を浴槽内にゆっくりと移動する

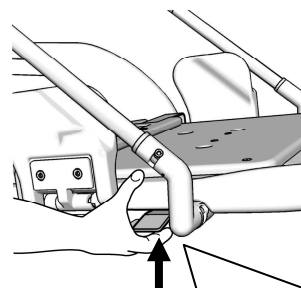


ロック解除レバーを握り、ロックを解除

⚠ 警告

移動し始めたら、レバーから指を離す

- 3 浴槽にロックされていることを確認する

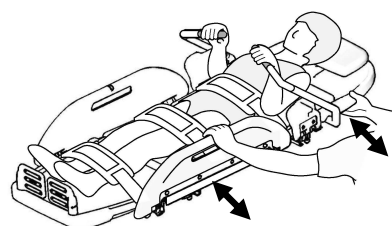

⚠ 警告

移動後、押し引きしてロックを確認

# 5

## 浴槽を上昇させ入浴させる

### 1 入浴スイッチを押す




- ・途中で止めたい場合は、**停止**スイッチを押す
- ・湯の温度が 44℃以上のとき自動的に上昇停止

#### ⚠ 警告

浴槽内の湯温確認

### 2 浴槽が上昇し、入浴を開始

＜ROB-410 の場合、担架が浴槽の中央まで自動でスライドし、その後に浴槽が上昇＞

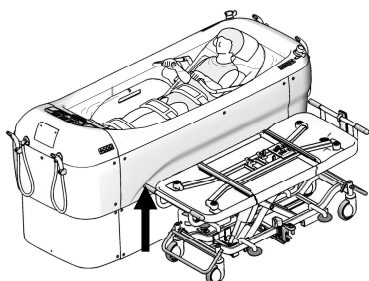

#### ⚠ 警告

入浴中は入浴者を常に看視

### 3 バブラーを使用する場合は、バブラースイッチを押す

＜バブラー搭載機のみ＞



### 4 差し湯を使用する場合は、給湯温度を設定し、差し湯スイッチを押す

給湯温度調節

あつい

ぬるい




点灯

差し湯  
切/入


## 入浴手順

### 6 入浴中にストレッチャーの連結を解除したい場合

#### 1 キャスターのロックを解除する

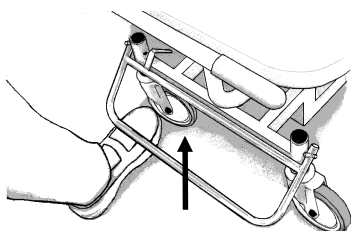

#### 2 ストレッチャーの解除ペダルを踏む

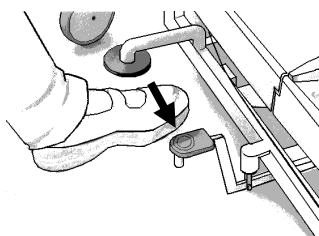


消灯

連結完了

連結完了ランプが消灯

#### 3 ペダルを踏みながら、ストレッチャーを浴槽から離す

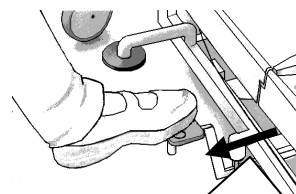

ストレッチャーを少し引く

#### ⚠ 警告


連結ロック解除後は、  
速やかに解除ペダルから足を離す

### 連結解除したストレッチャーを再度連結したい場合

◎ P.5「ストレッチャーを浴槽へ連結」の①～③を参照してください。

## 7 浴槽を下降させ出浴させる

- 1 出浴したい側にストレッチャーが連結されていることを確認

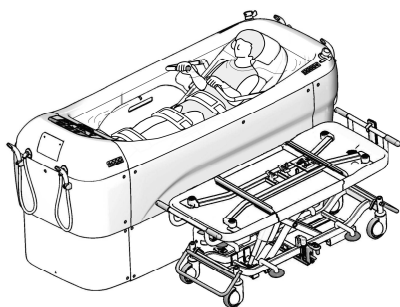

- 2 出浴スイッチを押す




出浴したい側（ストレッチャー連結側）の  
**出浴**スイッチを押す。

# 入浴手順

## 8 担架をストレッチャーへ移動する

### 1 担架をストレッチャーにゆっくりと移動する

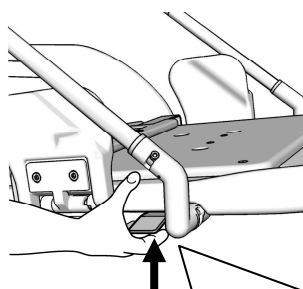


ロック解除レバーを握り、ロックを解除

⚠ 警告

移動し始めたら、レバーから指を離す

### 2 ストレッチャーにロックされていることを確認する

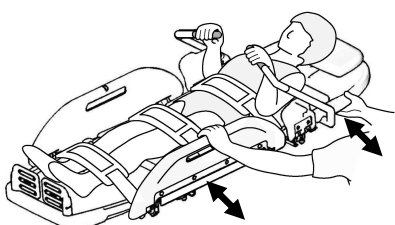


⚠ 警告


移動後、押し引きしてロックを確認

## 9 ストレッチャーの連結を解除

### 1 キャスターのロックを解除する

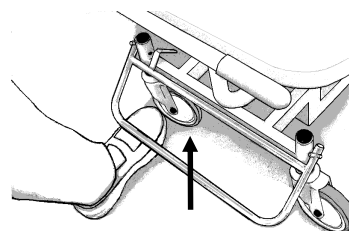


### 2 ストレッチャーの解除ペダルを踏む

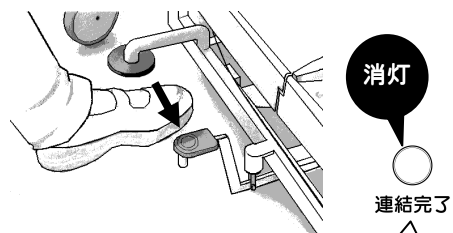

連結完了ランプが消灯

### 3 ペダルを踏みながら、ストレッチャーを浴槽から離す

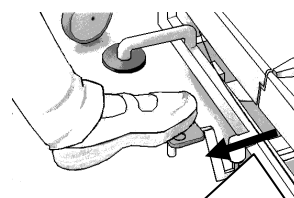

ストレッチャーを少し引く


⚠ 警告

連結ロック解除後は、  
速やかに解除ペダルから足を離す


# 10 担架からの移乗

## 1 ストレッチャーの高さを調節する

<ST-380,380S の場合>

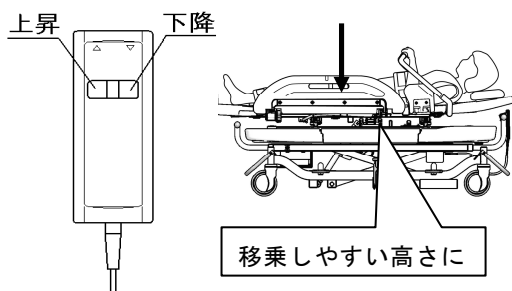


## 2 手すりを跳ね上げる

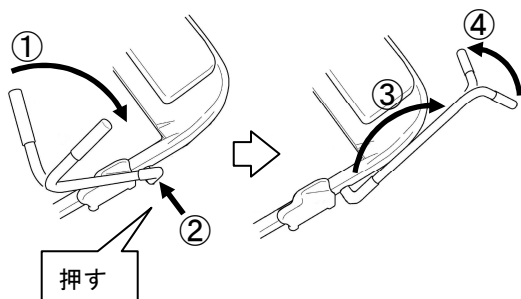


## 3 上肢用サイドフェンスを倒す

<WS-400 の場合>

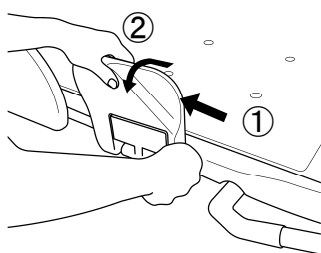


## 4 下肢用サイドフェンスを倒す

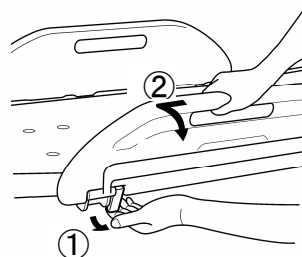

⚠ 警告

移乗と反対側のサイドフェンスは  
起こしておく

## 5 安全ベルトを外す

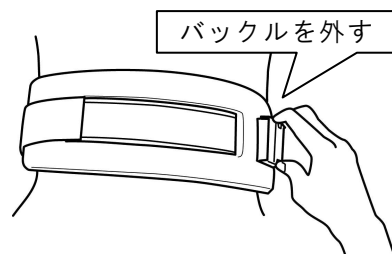

⚠ 警告

入浴者の落下に注意

## 6 担架から移乗する

